



**NOAL**  
**MOBILITY**  
**CARE**




**Facilità di utilizzo,  
silenziosità e  
design funzionale**

**SERVOSCALA  
A PIATTAFORMA**

# ARTIRA

## Servoscala a piattaforma per scale curve

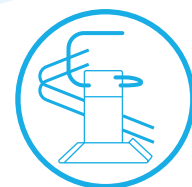


**ARTIRA è il servoscala a piattaforma dal design compatto per percorsi con curve, scale strette, ripide e a chiocciola sia interne che esterne.**

Viene realizzato a misura di scala, garantendo il minimo ingombro. È flessibile nelle dimensioni e nei colori per garantire una perfetta integrazione nella vostra casa. Il movimento di Artira è fluido e silenzioso, è quindi adatto sia per case monofamiliari che per condomini. Questo modello di servoscala è disponibile sia in

versione manuale, sia con movimenti automatizzati che permettono all'utente di superare scale e dislivelli di ogni genere con facilità e senza sforzi, in totale autonomia. La movimentazione viene azionata con una pressione costante dei pulsanti posti sul veicolo. Performante e sicuro grazie alla presenza di appositi sensori posizionati sul

veicolo, sulla piattaforma e sulle rampe di accesso. Artira può accogliere una persona su sedia a rotelle oppure una persona seduta grazie alla comoda poltroncina richiudibile applicabile per rispondere a differenti esigenze di mobilità.



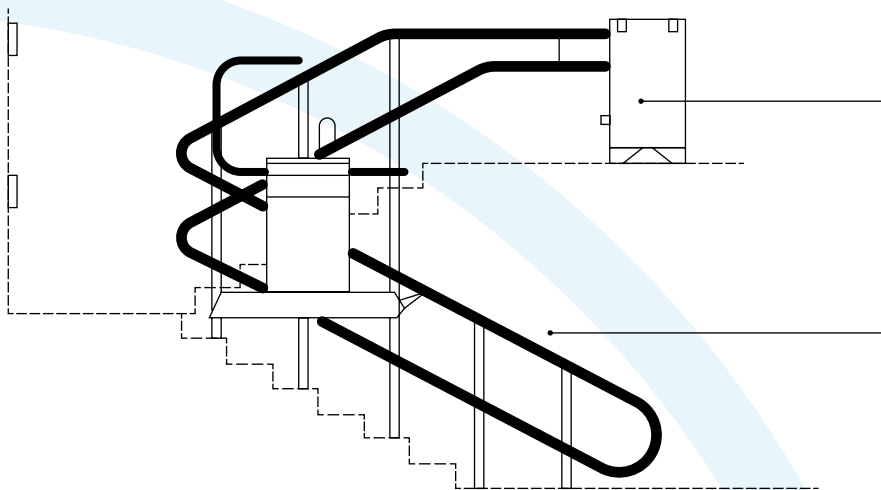

### Il gruppo di traino

Il motore, posizionato a monte in cima alle scale, ha dimensioni diverse a seconda della lunghezza del percorso che deve compiere il servoscala.

### Le guide


Sono costituite da due tubi (diam.50 mm) che seguono l'andamento della scala ed ospitano le funi di trazione e supporto.

## Ingombro

Larghezza minima scala con accessi opposti: 1020 mm.

(con fissaggio a gradino e pedana standard)

Ingombro guida: circa 110 mm.

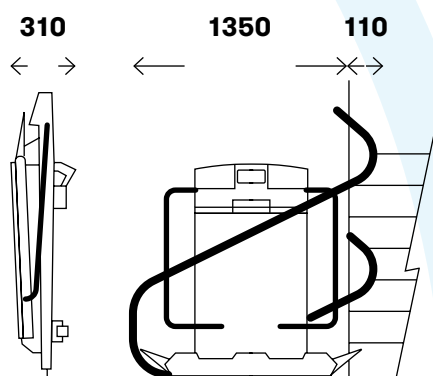

• misure espresse in mm



## Caratteristiche generali standard

- Portata: 250kg
- Dimensioni pedana: 750x700 e 800x800 mm
- Trazione a fune a circuito chiuso
- Velocità massima: 0,10-0,15 mt/s
- Accesso lati opposti
- Fissaggio guida a gradino o a muro
- Nr. 2 maniglioni di sicurezza con chiusura verso il basso
- Apertura e chiusura maniglioni, pedana e bandelle di raccordo manuale
- Pulsantiera di piano fissa e pulsanti a bordo; pulsantiera per accompagnatore con filo estensibile
- Guida e supporti verniciati per ambienti interni.


## Optional

- Dimensioni pedana fuori standard
- Accesso su 3 lati
- Apertura e chiusura maniglioni e pedana motorizzati
- Versione per esterno con guida e supporti zincati e telo di copertura
- Seggiolino ribaltabile
- Guida verniciata di colore a scelta
- Veicolo verniciato di colore a scelta.



Scopri il **centro autorizzato** più vicino a te nel nostro sito

[www.mobilitycare.it](http://www.mobilitycare.it)

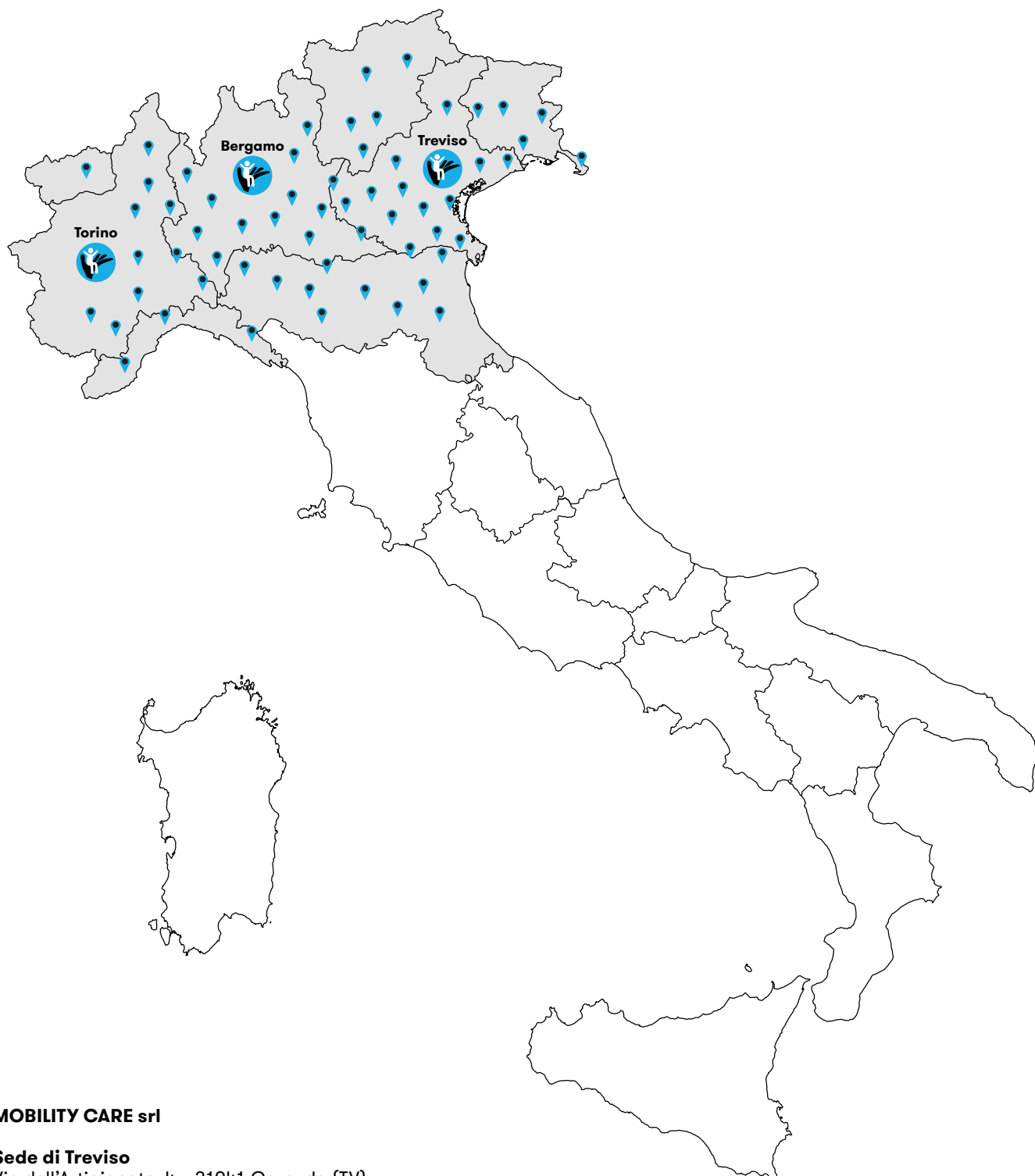

**MOBILITY CARE srl**

**Sede di Treviso**

Via dell'Artigianato, 4 - 31041 Cornuda (TV)  
Tel. +39 0423 86443 | Fax +39 0423 1773000

**Sede di Bergamo**

Via Don Milani, 15/A - 24050 Civate Al Piano (BG)  
Tel. +39 0363 221873

**Sede di Torino**

Strada Commenda, 4/B - 4/C - 10072 Caselle Torinese (TO)  
Tel. +39 011 4452890

[www.mobilitycare.it](http://www.mobilitycare.it) | [info@mobilitycare.it](mailto:info@mobilitycare.it)



Numero Verde  
**800 59 80 78**