



**NOAL
MOBILITY
CARE**



**Facilità di utilizzo,
silenziosità e
design funzionale**

**SERVOSCALA
A PIATTAFORMA**

GTL30

Servoscala a piattaforma per le scale più complesse



Caratteristiche generali standard

- Portata: 300 Kg
- Dimensioni pedana: 700x900 mm
- Doppia trazione a pignone e cremagliera
- Velocità massima: 0,15 mt/s
- Pendenza variabile: da -60° a +60°
- Accesso lati opposti
- Fissaggio a muro o gradino
- Colore macchina: RAL 7040
- Pulsantiere di piano e comandi a bordo
- Apertura e chiusura maniglioni, pedana e bandelle di raccordo automatica
- Guide in acciaio inox.

GTL30 è il servoscala ideale per scale curve, percorsi orizzontali e cambi di inclinazione sia all'interno che all'esterno.


Questo servoscala a piattaforma è stato appositamente sviluppato per percorsi complessi e con cambi di pendenza.

Il sistema a doppia trazione utilizzato è unico, perché rende possibile la salita e la discesa senza bisogno di una ulteriore guida

di stabilizzazione, garantendo la massima stabilità durante la corsa. Silenzioso ed affidabile può accogliere una persona su sedia a rotelle oppure una persona seduta grazie alla possibilità di applicare una comoda poltroncina richiudibile.

Ingombro

Larghezza minima scala curva con accessi opposti: 1170 mm.
(con fissaggio a gradino e pedana standard)

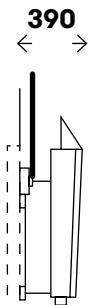


• misure espresse in mm

Optional

- Dimensioni pedana su misura
- Accesso su 3 lati
- Versione per esterno (IP56) con guida e supporti zincati e telo di copertura
- Seggiolino ribaltabile
- Guida verniciata di colore a scelta
- Veicolo verniciato di colore a scelta.



Scopri il **centro autorizzato** più vicino a te nel nostro sito
www.mobilitycare.it

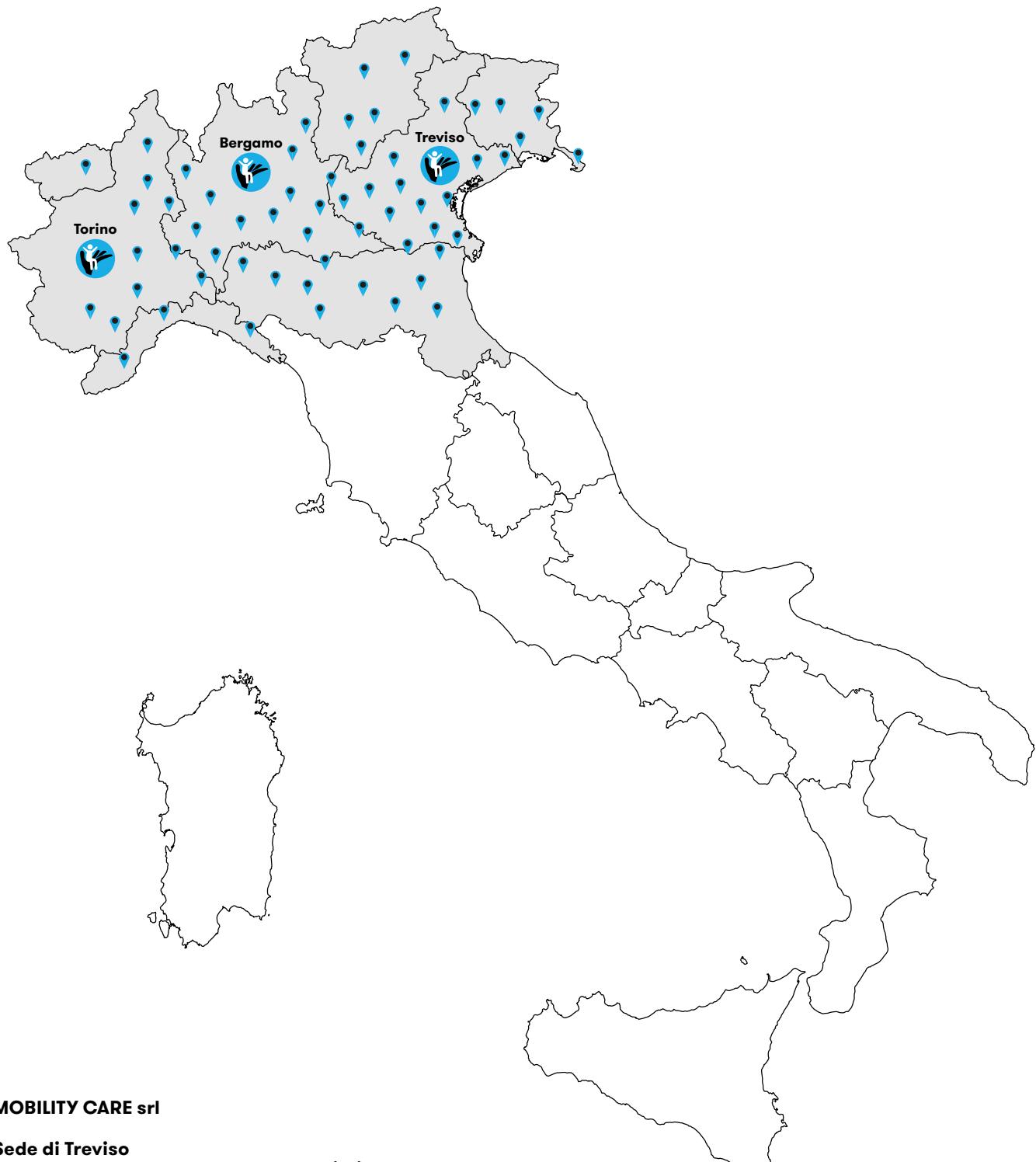

MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso

Via dell'Artigianato, 4 – 31041 Cornuda (TV)
Tel. +39 0423 86443 | Fax +39 0423 1773000

Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A – 24050 Cividate Al Piano (BG)
Tel. +39 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C – 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. +39 011 4452890

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it



Numero Verde
800 59 80 78